

www.zenlong.es

Stiper

Quars

www.zenlong.es

Bio Resonador de la Energía

Equilibra

Regula

Restaura el orden

Que es el Stiper ?




STIPER son pequeñas almohadillas de silicio cristalizado SiO_2 (cuarzo) especialmente esponjoso. Durante el proceso de cristalización se ha tenido en cuenta las condiciones físicas y mediambientales de luz, sonido y reposo que le confieren sus especiales características, haciendo que sea totalmente neutro

La acción física aporta más sangre, oxígeno y nutrientes es la acción anti-inflamatoria, es conocido también la acupuntura en el tratamiento del dolor y su acción en la liberación de las endorfinas, que modifican la percepción dolorosa en la médula espinal, el mesencéfalo, el tálamo y la corteza cerebral, por lo que desempeñan una importante función en la analgesia asociada a la acupuntura. Y ha sido utilizado con gran eficacia para el tratamiento de todo tipo de dolores de espalda, migrañas, lesiones deportivas, etc.

La acción energética al utilizar cristales de cuarzo para la curación, se trabaja con los sistemas que alimentan, cuidan y reparan los niveles celulares o moleculares del cuerpo humano. Los cuarzos tienen efectos poderosos para corregir los patrones e energía desequilibrada, que puede ser la causa de molestias o de los síntomas de las enfermedades.

La energía llega al Stiper en diferentes longitudes de onda desequilibradas

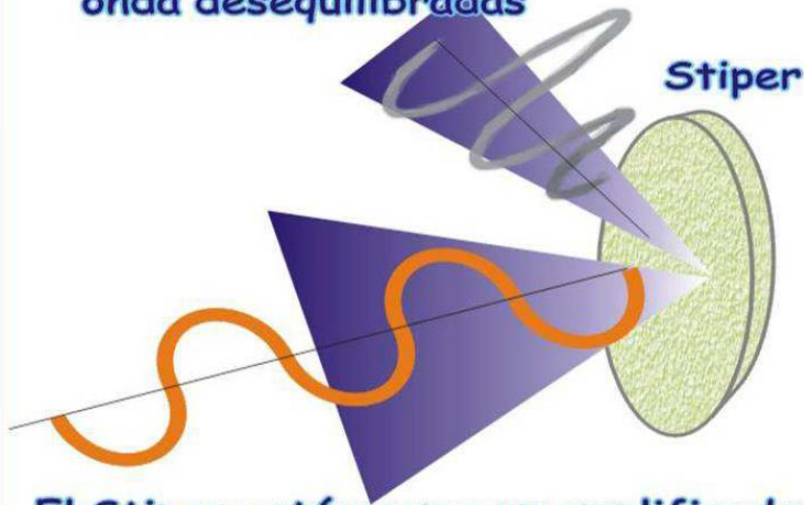

El Stiper actúa como un amplificador y regulador de la ondas y energía del organismo

Generador de
fotones infrarrojos



Se aplica en las zonas dolorosas, localizadas con la presión,
para el tratamiento del dolor de espalda



Se aplica en las zonas dolorosas, localizadas con la presión,
para dolores articulares y musculares



Se aplica en las zonas dolorosas, localizadas con la presión,
para el dolor articular de la rodilla



Aplicación en puntos y protocolos de acupuntura





Aplicación en puntos y protocolos de acupuntura 3 H



Aplicación en puntos y protocolos de acupuntura



4 IG



30 Minutes

Especial para bebes



Stiper nº 3 Auriculo

3

Adicción

Dinamismo y relajacion

pellet

Hambre

Agresividad

Tristeza





Modo de Empleo



Se aplican con adhesivo hipoalergénico cortados a 2,5 x 3 cm en puntos dolorosos o zonas elegidas hasta la mejora del dolor la patología, estancamiento o bloqueo energético.

Consiguiendo una estimulación y reequilibrio constante de forma fácil, y por lo tanto no es necesario el conocimiento de puntos de acupuntura para poder aplicarlo, y además evitamos la aversión que provocan las agujas en algunas personas, tanto en niños como en personas adultas.

❖ **Estándar** lo fijaremos durante 30 a 45 minutos, en los chakras, puntos de acupuntura y zonas reflejas como la cara, manos y/o pies.

❖ **Estimulación permanente**, lo fijaremos de 1 a 6 días, dependiendo de la patología que estemos tratando. La renovación está en función del nivel de carga emocional del paciente y el tipo de piel. Por ejemplo, cuando tratamos un dolor articular lo solemos dejar de 2 a 6 días, un promedio de 3 días y cuando se trata de un problema de ansiedad o estrés conviene sustituirlo todos los días (a medida que el problema mejora podremos dejarlo durante 2 ó 3 días).

El Stiper no tiene efectos secundarios, además al ser un cuarzo tiene memoria al igual que el agua y esto nos permite programarlo con la información ya sea con **LA INTENCIÓN**, Varita Laaps, el Color, Reiki, Esencias florales, Homeopatía, etc..

De esta forma abre un campo de aplicación ilimitado dependiendo de la especialidad del terapeuta

TRATAMIENTO LOCAL Y MEJORAR LA CIRCULACIÓN Y LA ELIMINACIÓN DE LÍQUIDOS



Aplicación local

Estetica y belleza lo aplicamos 30 minutos



Utilizaremos 5 Stiper realizando un parche para zonas dolorosas mas amplias





The logo for Stiper Quars is set within a circular frame with a white border on a dark blue background. It features a large, clear quartz crystal in the center, surrounded by a pile of small white pills. The text 'www.zenlong.es' is positioned above the crystal, 'Stiper' is written in a large, bold, yellow font across the middle, and 'Quars' is written in a smaller, white font below it.

www.zenlong.es

Stiper

Quars

www.zenlong.es

