

---



**POWER**  
TERAHERTZ DEVICE

# **Manual Vpower y SEI**

## **Terapias de calor**

Juan Pablo Moltó Ripoll

---



# Manual VPower y SEI

---

Prof. Juan Pablo Moltó Ripoll

Editorial PNA  
2025

Datos de autor:

1 edición 2025

© derechos de edición y autor reservados.

Juan Pablo Moltó Ripoll. 21663675K

[www.moltoripoll.es](http://www.moltoripoll.es)

**© Juan Pablo Moltó Ripoll**

Diseño de edición equipo de PNA.

ISBN: 9798304758710

Independently published

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformada de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de su titular. Comuníquese con el titular wapp +34 607861099

# Índice

<b>TERAHERTZ.....</b>	<b>7</b>
<i>Fisiología del Calor:.....</i>	<i>8</i>
<b>VPOWER.....</b>	<b>11</b>
<i>¿Cómo usarlo de forma sencilla y estándar? .....</i>	<i>11</i>
<i>Puntos dolorosos .....</i>	<i>13</i>
<i>Contraindicaciones .....</i>	<i>13</i>
<b>SEI, SMART ELECTROMAGNETIC INVIGORATOR .....</b>	<b>15</b>
<i>¿Qué es el SEI? .....</i>	<i>15</i>
¿Cómo funciona el SEI? .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
¿Cuál es la duración recomendada para su uso? .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Aplicaciones Terapéuticas del PEMF .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
SEI: Especialidades.....	20
<i>Consideraciones y contraindicaciones .....</i>	<i>22</i>
<b>APOYOS Y FORMACIÓN .....</b>	<b>23</b>




---

# TeraHertz

En la industria de la medicina y la ciencia, constantemente se están descubriendo nuevas tecnologías y terapias que pueden ayudar a mejorar la salud y el bienestar de las personas. En este sentido, una empresa que está marcando la diferencia es Viiva, especializada en *terapias de calor y bioenergéticas*.



Las ondas de terahercios, también conocidas como infrarrojo lejano, son ondas electromagnéticas con una frecuencia de 0,1 a 10 THz. Aunque no son invisibles, poseen todas las características de la luz visible, siendo el infrarrojo lejano su componente principal.

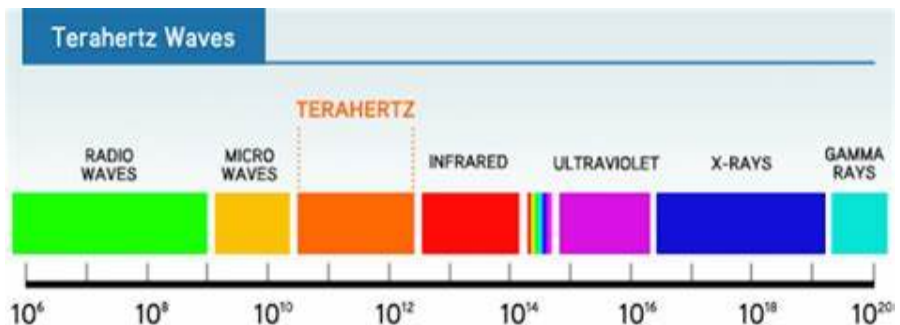

Debido a sus propiedades físicas únicas, cuando las ondas de terahercios son absorbidas por la piel humana, producen una serie de

---

efectos biológicos. Entre estos efectos se encuentran el calentamiento por infrarrojo lejano, la resonancia, la activación de moléculas de agua y macromoléculas en el cuerpo, la reducción de lípidos y colesterol en sangre, la mejora de la microcirculación, el metabolismo y la función inmunológica.

Uno de los efectos más importantes de las ondas de terahercios es su capacidad de generar calor y resonancia, lo que tiene un impacto significativo en la salud. Entre los beneficios más destacados se incluyen:

1. **Efectos sobre el sistema nervioso central:** Mejora de la función neuronal y posible alivio de trastornos nerviosos.
2. **Mejora de la microcirculación vascular:** Promoción de una mejor circulación sanguínea a nivel capilar.
3. **Retraso del envejecimiento y aceleración de la regeneración celular:** Contribución a la longevidad y a la rápida recuperación de los tejidos.
4. **Tratamiento de enfermedades articulares:** Alivio y posible mejora de condiciones articulares crónicas.

Estos efectos hacen que las ondas de terahercios sean de gran interés para aplicaciones terapéuticas y de bienestar.

## **Fisiología del Calor:**

### **Inmunoestimulación**

La elevación de la temperatura corporal local inducida por el SEI y VPower estimulan el sistema inmunológico de varias maneras. Al aumentar la actividad celular en los tejidos profundos, se intensifica el metabolismo celular y la producción de calor, lo cual activa las células inmunitarias como los linfocitos y macrófagos.

Estas células son esenciales para la defensa del cuerpo contra infecciones y enfermedades. Además, el calor puede mejorar la circulación sanguínea, facilitando el transporte de nutrientes y oxígeno a las células inmunitarias, lo que mejora su eficiencia y respuesta ante

patógenos. La temperatura elevada también crea un ambiente menos favorable para la reproducción de ciertos microorganismos, ayudando al sistema inmunológico a combatir infecciones de manera más efectiva. Al aprovechar estos mecanismos, el SEI contribuye a fortalecer la inmunidad y a restaurar la salud general del organismo.

### **Metabolismo, colesterol, triglicéridos.**

Al eliminar el frío y la humedad, el SEI y VPower ayudan a equilibrar el entorno interno del cuerpo. La mejora en la circulación sanguínea facilita el suministro de oxígeno y nutrientes a las células. Además, al expulsar toxinas y activar las células saludables, el dispositivo promueve un ambiente interno donde las células normales pueden funcionar óptimamente. Simultáneamente, contribuye a descomponer las células dañadas o no saludables, ayudando a mantener un equilibrio celular que favorece el bienestar general. Estos efectos combinados potencian la capacidad del cuerpo para autorregularse y mantenerse saludable. Esto ayuda a descomponer el colesterol y los triglicéridos que están adheridos a las paredes de los vasos sanguíneos y mejora el ambiente interno del cuerpo.

### **Medicina china**

En la medicina tradicional china (MTC), el concepto de frío y humedad se refiere a desequilibrios en el cuerpo que pueden causar diversos problemas de salud. Estos desequilibrios son considerados como factores patógenos externos que pueden afectar el flujo de energía o "chi" y provocar enfermedades. El calor, aplicado a través de estos dispositivos juega un papel crucial en la eliminación de estos factores.

### **Aumenta la energía y elimina células**

Activa las células y aumenta la energía. Mejora el metabolismo celular, proporciona más nutrientes a las células, aumenta la permeabilidad de la membrana celular y activa las mitocondrias, lo que activa las células y la energía celular. También puede eliminar células mutadas, activar células inactivas y reparar células dañadas.

**Quema grasa y moldea el cuerpo.**

Las ondas de energía se introducen a través de los pies para generar calor que se dispersa rápidamente por todo el cuerpo, mejorando la circulación celular y sanguínea. Esto aumenta efectivamente la temperatura de la grasa subcutánea. ¡Una sesión de 20 minutos equivale a 2 horas de ejercicio aeróbico! Restaura el metabolismo y consume más energía, promoviendo así la quema de grasa y moldeando el cuerpo.


**Alivia la inflamación y el dolor.**

Cuando se generan ondas de energía de calor en el cuerpo, aumentan el flujo sanguíneo, relajan los vasos sanguíneos y mejoran su permeabilidad, mejorando la nutrición y el metabolismo de los tejidos y reduciendo la inflamación. Esto ayuda a aliviar condiciones como la artritis, problemas ginecológicos, manos y pies fríos, mientras alivia el dolor relacionado con los nervios.



## VPower

VPower es el dispositivo tecnológico de ondas Terahertz y calor mecánico de la empresa Viiva, de Estados Unidos. Este dispositivo emite por su orientación efectiva las ondas THz y el calor mecánico inducido por ventilación.

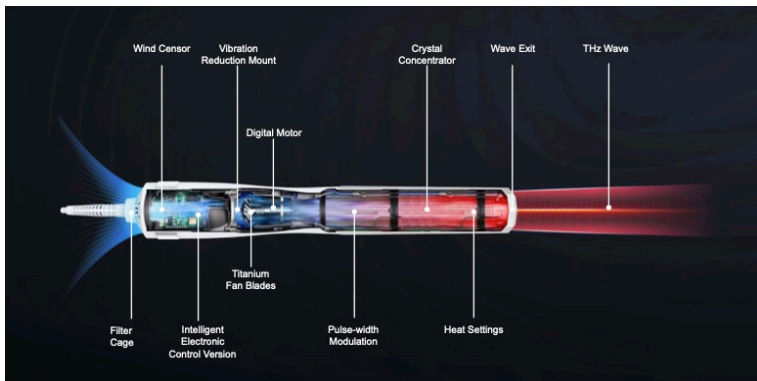

El dispositivo se coloca próximo a la piel de forma vertical, utilizando de forma fija con un tiempo de 2 a 3 minutos en puntos concretos o a modo masaje recorriendo las zonas deseadas con un proceso lento y pausado, con el objetivo de calentar el tejido mientras se recorre la zona deseada.

**¿Cómo usarlo de forma sencilla y estándar?**

---

En base a las publicaciones de la compañía Viiva se puede usar esta tecnológica de forma sistémica con el objetivo de revitalizar todo el sistema *Psico-Neuro-Inmuno-Endocrino*.

A continuación, presentamos el protocolo sistémico de la propuesta. se comienza con la toma dos vasos de agua. (1) empezamos en las palmas de las manos, comenzando en la izquierda en las mujeres y en la derecha en los hombres. posteriormente pasamos a la planta de los pies (2). nos dirigimos a la zona poplítea (3), pasamos a trabajar la zona de la ingle (4), de ahí pasamos a las axilas (5), posteriormente pasamos a los ganglios del cuello (6), para continuar en la zona de atrás del cuello (7), pasando a la parte más alta de la cabeza (8), de la zona más alta vamos a pasar a la contraria a la zona del ano (9), para finalizar bajando por toda la espalda a la altura de las vértebras. Finalizamos con la toma de dos vasos de agua, no deberíamos de ducharnos mínimo cuatro horas después.



## Puntos dolorosos



Las ondas Terahercios han emergido como una herramienta innovadora en el tratamiento de patologías osteomusculares, gracias a su capacidad para penetrar tejidos biológicos, inducir un aumento localizado de temperatura y mejorar la circulación. Estas propiedades facilitan la entrega de oxígeno y nutrientes a tejidos dañados, favoreciendo la regeneración, reducción de dolor e inflamación, y mayor flexibilidad en condiciones como la artrosis y fibromialgia.

Además, las ondas THz son útiles en la **terapia de los puntos Ah-Shi**, zonas de bloqueo de Qi relacionadas **con**

**puntos gatillo**, caracterizadas por dolor localizado, inflamación y alteraciones histológicas. Su estimulación suave y no invasiva contribuye a liberar bloqueos energéticos y aliviar el dolor, proporcionando un enfoque complementario eficaz a las terapias tradicionales.

El uso de este dispositivo en los puntos dolorosos es muy sencillo, se puede complementar al masaje, a la acupuntura, a cualquier terapéutica, la idea es estimular los puntos dolorosos durante 3 minutos.

## Contraindicaciones

 **NOT RECOMMENDED FOR** 

 **PREGNANT OR MENSTRUATING WOMEN**

 **CORONARY ARTERY STENT**


 **LENS IMPLANTS**

 **OPEN WOUNDS/FRACTURED BONES**

 **OBJECTS IMPLANTED**

*If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy frequency and vibration*

Nicola Tesla

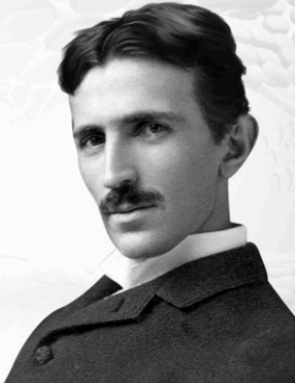

---

# SEI, Smart Electromagnetic Invigorator



La temperatura determina la salud y la vida humana. La temperatura normal del cuerpo humano es de 36.5°C. Por cada disminución de 1°C, la inmunidad disminuye en un 30%. Las células cancerosas prosperan mejor a una temperatura de 35°C. Por cada aumento de 1°C, el metabolismo se acelera en un 12%. La mejor manera de fortalecer la inmunidad es aumentar la temperatura corporal.

El **Smart Electromagnetic Invigorator (SEI)** es un dispositivo diseñado para la terapia de salud integral del cuerpo. Utiliza tecnología de termoterapia sub-alta temperatura para generar una onda de energía de frecuencia especial que interactúa con el cuerpo. Esta energía de resonancia penetra en todo el organismo, induciendo un "**calor profundo**" desde el interior y provocando sudoración en un corto período de tiempo.


**¿Qué es el SEI?**

---

El **Smart Electromagnetic Invigorator (SEI)** es un dispositivo diseñado para la terapia de salud integral. Utiliza tecnología de terapia térmica de subalta temperatura para generar una onda de energía de frecuencia especial que interactúa con el cuerpo. Esta energía de resonancia penetra en todo el organismo, induciendo un "calor profundo" desde el interior, lo que provoca sudoración en poco tiempo.

### ¿Cómo funciona el SEI?

El dispositivo produce una frecuencia única que, a través de un panel para los pies, interactúa con las plantas de los pies. Este contacto genera una onda de energía específica que transmite energía de resonancia al cuerpo. Esto hace que los fluidos, la sangre y las células del cuerpo resuenen, creando un calor profundo espontáneo y provocando sudoración sin necesidad de actividad física.

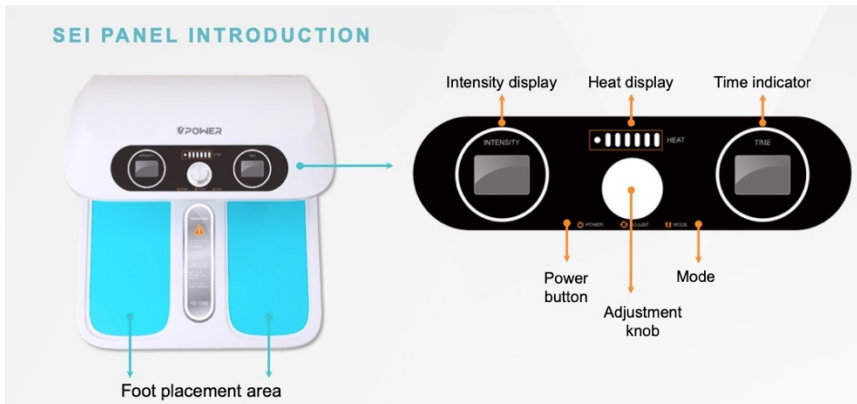

### ¿Cuál es la frecuencia del SEI?

Terahertz es una unidad de medición de frecuencia que puede interactuar de manera segura con el cuerpo humano dentro de ciertos rangos de frecuencia. Estrictamente hablando, aunque el SEI y productos similares en el mercado están etiquetados como terahertz, su frecuencia operativa no alcanza niveles de terahertz reales. La frecuencia del SEI es de **1 MHz**.

### ¿Por qué algunos llaman al dispositivo un producto de terahertz?

El término se utiliza de manera comercial, aunque la frecuencia real del dispositivo no alcanza el rango del terahertz.

La afirmación de que la frecuencia del Smart Electromagnetic Invigorator (SEI) es de 1 MHz se refiere a la velocidad con la que el dispositivo genera oscilaciones electromagnéticas por segundo. Aquí está explicado en términos más accesibles y detallados:

¿Qué significa 1 MHz?

- 1 MHz (megahertz) equivale a 1,000,000 de ciclos por segundo. Esto significa que la onda electromagnética emitida por el SEI completa un millón de oscilaciones por segundo.

- Esta frecuencia está dentro del rango de frecuencias de radio y es común en dispositivos que emiten energía para interactuar con tejidos del cuerpo humano, como ciertos equipos de fisioterapia o dispositivos médicos de baja frecuencia.

¿Por qué es importante esta frecuencia?

- Seguridad: La frecuencia de 1 MHz es suficientemente baja para interactuar de manera segura con los tejidos del cuerpo humano sin causar daño. No alcanza niveles de terahertz (una frecuencia mucho más alta), lo cual podría ser perjudicial.

- Eficiencia terapéutica: Esta frecuencia permite que las ondas electromagnéticas penetren en los tejidos corporales y generen resonancia en líquidos, células y estructuras internas. Esto facilita el calentamiento interno profundo ("calor profundo").

Comparación con otras tecnologías

- Dispositivos como los ultrasonidos terapéuticos también operan cerca de frecuencias como 1 MHz, ya que este rango tiene una capacidad óptima para penetrar tejidos blandos sin ser absorbido o reflejado excesivamente.

- Aunque el SEI no opera en el rango de terahertz (que está en el rango de  $10^{12}$  Hz, es decir, mucho más alto), 1 MHz sigue siendo efectivo para inducir efectos terapéuticos a través del calentamiento interno y la resonancia celular.

En resumen, la frecuencia de 1 MHz del SEI está diseñada para ser segura y efectiva en la estimulación terapéutica, enfocándose en generar calor interno y mejorar funciones biológicas.

El uso del SEI es ideal para combinar con el VPower

### ¿Cuál es el rango de temperatura para cada nivel de intensidad?

El SEI tiene **30 niveles de intensidad**, y la percepción de la temperatura varía según factores como la hidratación del cuerpo, el grosor de la piel en los pies y la edad. Por lo tanto, no es posible determinar una temperatura específica para cada nivel, a diferencia de los dispositivos que muestran calor de manera visible.

### ¿El dispositivo emite un campo electromagnético? ¿Es pulsado o constante?

Sí, el dispositivo emite un campo electromagnético. Este campo no es constante y puede ajustarse; cuanto mayor sea la configuración, más fuerte será el campo electromagnético.

### ¿Cuál es la duración recomendada para cada uso?

Se recomienda utilizar el dispositivo durante **30 a 40 minutos por sesión**, con un intervalo mínimo de **4 horas entre sesiones**. El uso máximo es de **dos veces al día**, y se aconseja beber abundante agua antes y después de su uso.

**¿Cómo puedo ajustar la intensidad y el tiempo?**  
Puedes ajustar la intensidad y el tiempo utilizando el botón central: gíralo hacia la izquierda para disminuir y hacia la derecha para aumentar.

### **¿La luz roja del instrumento es de grado médico?**

La luz roja utilizada en el instrumento consiste en bombillas LED estándar. La mayoría de los productos en el mercado usan bombillas LED regulares similares.

### **¿Qué es el recubrimiento azul en la placa para los pies?**

El recubrimiento azul es una capa aislante que mejora la apariencia del producto y brinda una experiencia más cómoda durante su uso.

### **¿Hay un cable de conexión a tierra?**

Sí, el dispositivo incluye un cable de conexión a tierra.

### **¿Cómo uso el botón en el cable de alimentación con protección contra fallas?**

Úsalo normalmente. Si surge un problema de energía debido a una falla, presiona el botón en el cable de alimentación para restablecerlo.

### **¿Por qué podría sentir hormigueo o pinchazos durante el uso?**

El dispositivo genera un campo electromagnético durante su funcionamiento. Si tus pies están demasiado secos, el contacto podría no ser óptimo, lo que puede generar sensaciones de hormigueo o pinchazos.

### **¿Cuál es la diferencia entre EMS y PEMF?**

- **EMS:** Se refiere a pulsos estándar (microcorrientes) que pueden crear una sensación de hormigueo cuando se aplican al cuerpo.
- **PEMF:** Se refiere a la energía del campo electromagnético. El SEI incorpora tecnología PEMF.

### **¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso del SEI?**

1. No usar si tienes implantes metálicos en el cuerpo.
2. No apto para pacientes de alto riesgo.

3. Los diabéticos graves deben evitar el uso; los diabéticos moderados deben consultar a un médico (usarlo a temperaturas bajas).
4. No usar en mujeres embarazadas o niños.
5. No usar si tienes una enfermedad infecciosa.
6. Reducir el uso durante la menstruación.
7. No apto para personas con insuficiencia cardíaca o pulmonar.
8. Evitar usar con el estómago vacío (puede causar mareos) o demasiado lleno (puede provocar problemas digestivos).
9. No usar si te has sometido recientemente a una cirugía, ya que podría afectar la cicatrización de heridas.



## SEI: Especialidades

### Envejecimiento:

El envejecimiento de la población mundial está provocando un aumento de enfermedades crónicas y problemas de salud, lo que genera una demanda creciente de soluciones efectivas en el mercado de la salud. El SEI se presenta como una herramienta prometedora para la rehabilitación, el manejo del dolor y la mejora de la calidad de vida. Ofrece una opción no invasiva que puede mejorar

significativamente el bienestar de las personas con condiciones crónicas. Su eficacia y potencial de crecimiento la convierten en una solución atractiva para enfrentar los desafíos del envejecimiento poblacional.

### **Enfermedades crónicas:**

Se puede utilizar para manejar enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Esta técnica ofrece la ventaja de poder ser aplicada en casa, lo que ayuda a reducir el dolor, promover la recuperación y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Al proporcionar un método no invasivo y efectivo, el SEI permite a las personas manejar sus condiciones de salud de manera más autónoma y cómoda.

### **Rehabilitación y Medicina Deportiva**

Ayuda a acelerar la cicatrización de heridas, reducir el dolor muscular y restaurar la función articular. Su aplicación es útil tanto en rehabilitación como en medicina deportiva, ya que ofrece un método eficaz para mejorar la recuperación y el rendimiento físico.

### **Reducción de Medicación**


Ayuda a reducir los efectos secundarios y la dependencia de los medicamentos, presentando una excelente opción de tratamiento no invasivo, sin duda bajo la supervisión del facultativo, al ser una técnica sistémica se consigue una mejora en multitud de patologías que por lo general se consideran crónicas, esta mejora puede conseguir que se reduzca la medicación.



## Consideraciones y contraindicaciones

1. No usar si se tienen implantes metálicos en el cuerpo.
2. Evitar en pacientes de alto riesgo.
3. Diabéticos graves deben abstenerse; diabéticos moderados deben consultar a un médico (usar a bajas temperaturas).
4. No recomendado para mujeres embarazadas ni niños.
5. No usar en caso de enfermedad infecciosa.
6. Reducir su uso durante la menstruación.
7. No usar en caso de insuficiencia cardíaca o pulmonar.
8. Evitar usar con el estómago vacío (puede causar mareos) o demasiado lleno (puede generar molestias digestivas).
9. Abstenerse si se ha realizado una cirugía reciente, ya que podría interferir en la cicatrización.

# Apoyos y formación

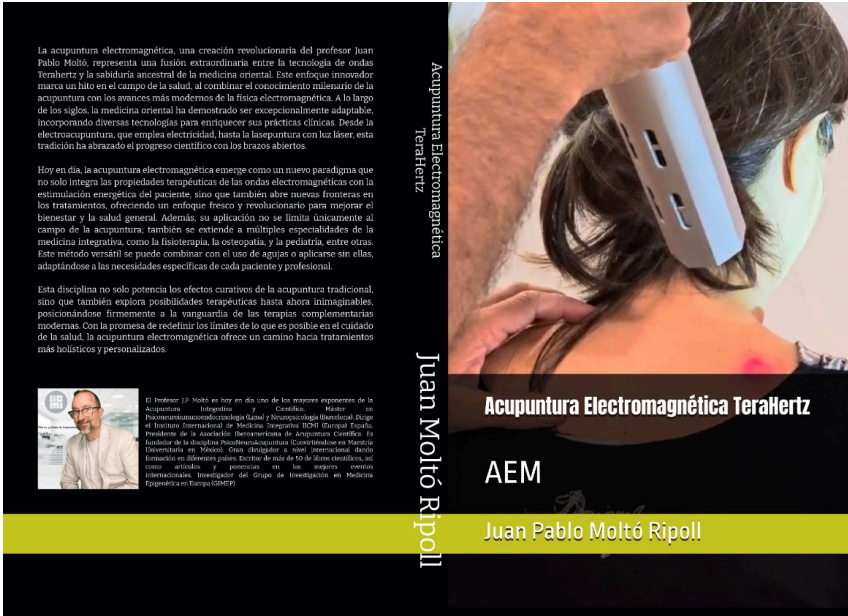

La acupuntura electromagnética, una creación revolucionaria del profesor Juan Pablo Moltó, representa una fusión extraordinaria entre la tecnología de ondas Terahertz y la sabiduría ancestral de la medicina oriental. Este enfoque innovador marca un hito en el campo de la salud, al combinar el conocimiento milenario de la acupuntura con los avances más modernos de la física electromagnética. A lo largo de los siglos, la medicina oriental ha demostrado ser excepcionalmente adaptable, incorporando diversas tecnologías para enriquecer sus prácticas clínicas. Desde la electroacupuntura, que emplea electricidad, hasta la laserpuntura con luz láser, esta tradición ha abrazado el progreso científico con los brazos abiertos.

Hoy en día, la acupuntura electromagnética emerge como un nuevo paradigma que no solo integra las propiedades terapéuticas de las ondas electromagnéticas con la estimulación energética del paciente, sino que también abre nuevas fronteras en los tratamientos, ofreciendo un enfoque fresco y revolucionario para mejorar el bienestar y la salud general. Además, su aplicación no se limita únicamente al campo de la acupuntura, también se extiende a múltiples especialidades de la medicina integrativa, como la fisioterapia, la osteopatía y la quiropraxia, entre otras. Este método versátil se puede combinar con el uso de agujas o aplicarse sin ellas, adaptándose a las necesidades específicas de cada paciente y profesional.

Esta disciplina no solo potencia los efectos curativos de la acupuntura tradicional, sino que también explora posibilidades terapéuticas hasta ahora inimaginables, posicionándose firmemente a la vanguardia de las terapias complementarias modernas. Con la promesa de redefinir los límites de lo que es posible en el cuidado de la salud, la acupuntura electromagnética ofrece un camino hacia tratamientos más holísticos y personalizados.

El profesor J.P. Moltó es hoy en día uno de los mayores exponentes de la Acupuntura Integrativa y Científica. Máster en Neurociencias y Acupuntura Científica. Director del Instituto Internacional de Medicina Integrativa (IIMI) Group España, Presidente de la Asociación Española de Acupuntura Científica. Es fundador de la disciplina Neuroacupuntura Científica en la Universidad de Valencia. Doctorado en Medicina. Con el título de Máster en Acupuntura Científica. Autor de numerosos artículos y conferencias en los mejores eventos internacionales. Investigador del Grupo de Investigación en Medicina Experimental en Europa (GIME).

**Acupuntura Electromagnética TeraHertz**  
**AEM**  
**Juan Pablo Moltó Ripoll**

En la actualidad el profesor Juan Pablo Moltó ha publicado este manual con todas las aplicaciones de esta tecnología.

## Contenido resumido:

PRIMERA PARTE

TECNOLOGÍA ELECTROMAGNÉTICA

VPOWER

Ondas Terahercios y su relación con el Chi

Ondas Terahercios: Campos electromagnéticos y su relación con la electricidad y el magnetismo

Aplicaciones terapéuticas de las ondas Terahercios

Terapia de calor con ondas Terahercios

Estimulación molecular con ondas Terahercios

Calor mecánico y efectos térmicos

Proteínas de choque térmico

Efectos de la radiación y efectos sistémicos

Regulación neurovegetativa

Hormesis

VPower

Bases teóricas integrativas

¿Qué es la electricidad?

¿Qué es el magnetismo?

¿Qué es el Chi?

Piezoelectricidad  
 El maestro corazón y el San Jiao  
 Bases científicas de las ondas de THz  
 Beneficios THz  
 Medicina China y ciencia THz  
 Efectos en enfermedades  
 neurológicas  
 Neuromodulación  
 Interacción con campos  
 electromagnéticos  
 THz y ADN  
 THz y Alzheimer  
 Impacto en proteínas celulares  
 Electroma y bioelectricidad  
 Los -eomas  
 Somos electricidad  
 Electroma y meridianos  
 Acupuntura y bioelectricidad  
 Acupuntura electromagnética en la  
 regulación orgánica  
 Modulación THz de los Zang y Fu  
 Funciones, aplicaciones y  
 tratamientos  
 Materia médica de los puntos Shu  
 dorsales  
 Tratamientos y protocolo general  
 VPower  
 Modulación electromagnética del  
 Shen  
 Los cinco puntos psicoemocionales  
 Manejo de las cicatrices con VPower  
 Protocolo de tratamiento  
 Uso del VPower en pediatría  
 Acupuntura Shonishin y VPower

Estimulación suave y eficaz  
 Beneficios holísticos  
  
 Manejo del dolor  
 Técnicas analgésicas  
 Puntos Ah-Shi y THz  
 Puntos locales y acción específica  
 Ley de la gran puntura  
 Tratamiento de los meridianos  
 tendinomusculares  
 Tratamiento de síndromes Bi  
 Estética y Terahertz  
 Mejora de la circulación y oxigenación  
 Reducción de celulitis  
 Tratamientos antienvjecimiento  
 Reducción de inflamación

## SEGUNDA PARTE

### TECNOLOGÍA ELECTROMAGNÉTICA

SEI

SEI

Smart Electromagnetic Invigorator

Fisiología del calor

SEI y medicina china

Aumento del Yang y equilibrio  
 energético

Integración con acupuntura  
 tradicional


Síndromes y tecnología SEI

Sustancias vitales y Zang-Fu

Oncología y SEI

Calor biológico y cáncer

Protocolo de tratamiento oncológico  
 integrado

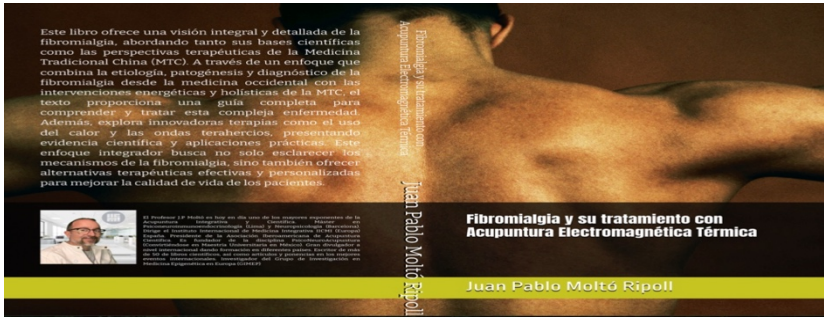

En este libro ofrezco una visión integral sobre la fibromialgia, combinando el conocimiento científico de la medicina occidental con las perspectivas energéticas de la Medicina Tradicional China (MTC). A través de un enfoque que aborda la etiología, patogénesis, diagnóstico y tratamiento, exploro tanto las bases fisiológicas como las intervenciones holísticas para comprender esta compleja enfermedad. Además, presento terapias innovadoras como el uso del calor y las ondas terahercios, respaldadas por evidencia científica, con el objetivo de proporcionar alternativas efectivas y personalizadas que mejoren la calidad de vida de los pacientes y optimicen el trabajo de los profesionales de la salud.



**IICMI**  
INSTITUTO INTERNACIONAL  
DE CIENCIAS MÉDICAS  
INTEGRATIVAS

Libro terminado el 25 diciembre 2024 en Benilloba. Modificado 15  
enero 2025 en Faro

Dudas y contacto en:  
[www.moltoripoll.es](http://www.moltoripoll.es)  
WAPP: +34 607 861099